


# JOBST®



## Comprinet® pro

Anatomisch gevormde anti-emboliekus

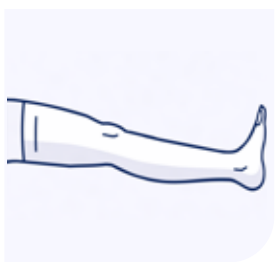


Een anti-emboliekus wordt ingezet ter voorkoming van diep-veneuze trombose. **Comprinet pro** heeft een afnemende drugradient van distaal naar proximaal en stimuleert daardoor de doorstromsnelheid van het bloed en reduceert de statis van bloedcirculatie.

### De patiënt

- ✓ Tromboseprofylaxe bij postoperatieve en langdurig geïmmobiliseerde patiënten.
- ✓ Geschikt voor patiënten met een omtrek tot 53 cm bij de kuit (c-niveau) en tot 86 cm bij het dijbeen (g-niveau) in de maten 1 tot en met 6, en tot 90 cm in de maten 7 en 8.
- ✓ Geschikt voor uiteenlopende beenvormen en -afmetingen door de speciale weeftechniek, waardoor de kous in beide richtingen zeer rekbaar is.

## JOBST® Comprinet® pro

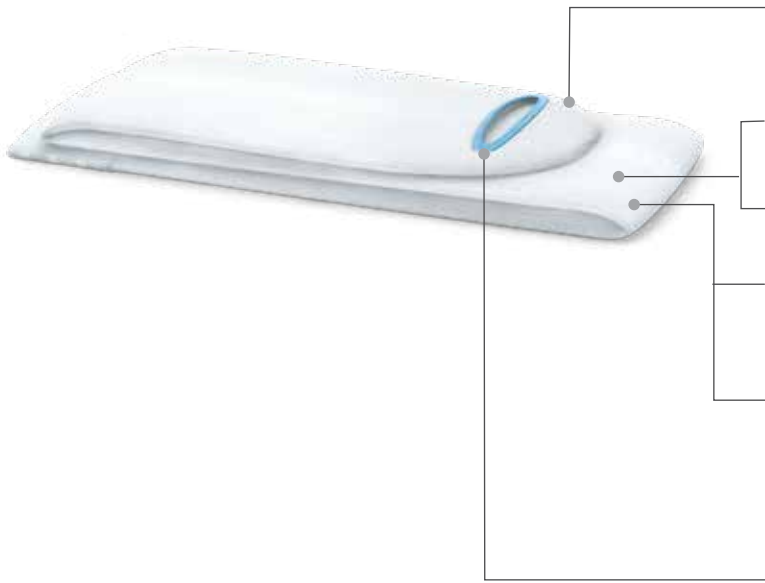

- ✓ Geeft een druk op b-niveau tussen 14-22 mmHg en op g-niveau tussen 5-12 mmHg.
- ✓ Gemaakt van zacht en duurzaam materiaal.
- ✓ Sterke en huidvriendelijke dijband.
- ✓ Kan tot circa 10 maal gewassen worden op maximaal 90°C.
- ✓ Comprinet pro kniekousen bevatten 74% polyamide en 26% elasthaan. Dijkousen bevatten 74% polyamide, 20% elasthaan en 6% neopreen (dijband).
- ✓ Dankzij een inspectievenster op de voet kan de doorbloeding van de tenen gemakkelijk gecontroleerd worden.

## Contra-indicaties







- Gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte
- Hartinsufficiëntie (decompensatio cordis)
- Bacteriële veneuze ontsteking (septic phlebitis)
- Ernstige vorm van trombose (phlegmasia coerulea dolens)

## Assortiment

Maat	Kuitomvang		Lengte tot lies		Artikelnummer	Inhoud per doos	Kleur	Inhoud verzendkarton
<b>Witte dijkous met teenvenster</b>								
1	klein	23-30	normaal	64-80	46335-00	10		4 x 10 (40)
2	klein	23-30	lang	80-97	46336-00	10		4 x 10 (40)
3	middel	30-38	normaal	64-80	46337-00	10		4 x 10 (40)
4	middel	30-38	lang	80-97	46338-00	10		4 x 10 (40)
5	groot	38-46	normaal	64-80	46388-00	10		4 x 10 (40)
6	groot	38-46	lang	80-97	46389-00	10		4 x 10 (40)
7	extra groot	46-53	normaal	64-80	77125-00	10		4 x 10 (40)
8	extra groot	46-53	lang	80-97	77128-00	10		4 x 10 (40)

Meet de kuitomvang op het dikste gedeelte van de kuit. Meet de lengte van de hak tot twee vingers onder de knie.  
Maximale dijomvang voor dijkous maat 1 t/m 6 is 86 cm en 90 cm voor maat 7 en 8.

# Assortiment

Maat	Kuitomvang		Artikelnummer	Inhoud per doos	Kleur	Inhoud verzendkarton
						
<b>Witte kniekous met teenvenster</b>						
1	klein	23-30	77026-00	10		4 x 10 (40)
2	middel	30-38	77027-00	10		4 x 10 (40)
3	groot	38-46	77028-00	10		4 x 10 (40)
4	extra groot	46-53	77124-00	10		4 x 10 (40)
<b>Beige kniekous met teenvenster</b>						
1	klein	23-30	77029-00	10		4 x 10 (40)
2	middel	30-38	77030-00	10		4 x 10 (40)
3	groot	38-46	77031-00	10		4 x 10 (40)
4	extra groot	46-53	77124-01	10		4 x 10 (40)

Wilt u meer informatie? Neem contact op of ga naar [JOBST.nl](https://www.jobst.nl)

## Daarom **JOBST**<sup>®</sup>

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**